

BL

PORADNIK

DARSONVAL

Ozonate



BEAUTY LIMITED®

PODSTAWOWE POJĘCIA

Prądy D'Arsonvala - odmiana prądów wysokiej częstotliwości o działaniu biologicznym polegającym na bezpośrednim wytworzeniu minimalnej ilości ciepła w tkankach w czasie oddziaływania energii elektromagnetycznej na organizm.

Peloty (elektrody szklane) o różnych kształtach, wypełnione gazem szlachetnym. Mogą być także z wtopioną elektrodą metalową. Peloty po zetknięciu ze skórą powodują iskrzenie (wyładowanie elektryczne) w kolorze uzależnionym od rodzaju gazu wypełniającego.

Ozon - reaktywna forma tlenu; gaz drażniący o właściwościach dezynfekujących. Zwiększa efektywność transportu tlenu przez krwinki czerwone, zwiększa elastyczność błon komórkowych i powoduje pobudzenie układu immunologicznego. Posiada charakterystyczny zapach.

WSKAZANIA, PRZECIWSKAZANIA, EFEKTY

Wskazania: cera tłusta; cera mieszana (obszar strefy T); cera trądzikowa; po mechanicznym oczyszczaniu twarzy; cera słabo ukrwiona; cera zwiotczała, pozbawiona blasku, zmęczona, szara; skóra niedotleniona; skóra po zabiegu depilacji woskiem; zmarszczki; łysienie skóry; łojotok; wypadanie włosów różnego pochodzenia; przetłuszczanie się włosów; skóra przed zabiegami oczyszczania; ściąganie i domykanie porów po zabiegu oczyszczania.

Przeciwwskazania: ciąża i okres karmienia piersią, teleangiektazje (pajączki nacyniowe); podatność na alergię skórne, trądzik różowaty; skaleczenia; otwarte rany; cera naczynekowa; popękane naczynka krwionośne; stany zapalne skóry; naczyńniaki i brodawki w obrębie twarzy; astma; metalowe implanty; choroby serca; nadciśnienie tętnicze; nowotwory; stany po operacyjnym usunięciu nowotworów (okres 5 lat); gorączka; obrzęki; nadpobudliwość nerwowa.

Efekty: działa dezynfekująco, antybakteryjnie i przeciwgrzybicznie na skórę; skóra oczyszczona; wspomaga absorpcję kremów w głąb skóry; wspomaga leczenie trądziku; niszczy beztlenowe bakterie wywołujące trądzik; reguluje wydzielanie sebum; oczyszcza pory; rozjaśnia przebarwienia; wygładza skórę; przywraca naturalny blask skórze; stymuluje krążenie krwi; przyspiesza metabolizm komórek skóry; skóra bardziej jędrna, wzmocniona i sprężysta; skóra dotleniona; wspomaga terapię zniszczonych włosów; zapobiega wypadaniu włosów; wspomaga terapię przy łysieniu plackowatym; wzmacnia i odżywia cebulki włosów; poprawa kondycji włosów; wspomaga zwalczanie łupieżu i ogranicza przetłuszczanie się włosów.

Zalecana częstotliwość zabiegu:

Codziennie lub co drugi dzień przez 6 tygodni. Czas trwania jednego zabiegu wynosi od 5 do 10 minut.*


**Częstotliwość, a także czas trwania zabiegu ustala się indywidualnie w oparciu o własne potrzeby lub po konsultacji ze specjalistą z dziedziny kosmetologii lub lekarzem dermatologiem.*

Odczucie: delikatne szczypanie i mrowienie w miejscu wykonywania zabiegu. Charakterystyczny zapach ozonu. Zabieg należy wykonywać delikatnie, stopniowo zwiększając natężenie, tak, aby przyzwyczać się do powyższych reakcji.

JAKIE PREPARATY MOGĄ BYĆ POTRZEBNE DO WYKONANIA ZABIEGU?

✔ **Żel lub krem przewodzący:** Pomaga w poprawnym przewodzeniu prądu i umożliwia lepszy kontakt elektrod z skórą.

✔ **Odpowiednie preparaty do pielęgnacji skóry:** Po zabiegu ważne jest zastosowanie łagodnych kosmetyków do pielęgnacji skóry, takich jak delikatny krem nawilżający czy preparat łagodzący.

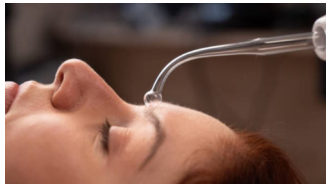

PRZYGOTOWANIE SKÓRY DO ZABIEGU

1. Oczyszść skórę: Przed zabiegiem, upewnij się, że skóra jest dokładnie oczyszczona. Użyj delikatnego oczyszczającego środka, który nie wysuszy skóry, usuwając zanieczyszczenia, makijaż i nadmiar sebum.

2. Usuń wszelkie produkty z skóry: Upewnij się, że skóra jest wolna od wszelkich kremów, serum czy makijażu. Pozostawienie substancji na skórze może wpłynąć na skuteczność zabiegu lub wywołać reakcje niepożądane.

3. Osusz skórę: Delikatnie osusz skórę ręcznikiem, unikając zbyt mocnego pocierania, szczególnie jeśli masz skórę wrażliwą lub skłoną do podrażnień.

4. Zastosuj żel lub krem przewodzący (opcjonalnie): Na obszar, który będzie poddany zabiegowi, nałóż cienką warstwę żelu lub kremu przewodzącego. To pomoże w lepszym przewodzeniu prądu oraz zminimalizuje ewentualne podrażnienia skóry.

5. Unikaj opalania: Zaleca się unikanie ekspozycji na słońce bezpośrednio przed zabiegiem, ponieważ opalona skóra może być bardziej podatna na reakcje podczas stosowania urządzenia Darsonval.

6. Konsultacja z profesjonalistą: Jeśli masz wątpliwości dotyczące przygotowania skóry do zabiegu Darsonval, skonsultuj się z kosmetologiem lub specjalistą, który pomoże dostosować procedurę do Twoich indywidualnych potrzeb i typu skóry.



DZIAŁANIE I EFEKTY

Zabiegi darsonvałem mogą mieć szereg pozytywnych efektów dla skóry i włosów.

Efekty mogą się różnić w zależności od indywidualnych cech skóry i włosów każdej osoby oraz od sposobu i regularności stosowania zabiegów Darsonvałem. Zawsze dobrze jest skonsultować się z profesjonalistą przed przystąpieniem do takich zabiegów.

Skóra:

✔ **Stymulacja krążenia krwi:** Zabiegi Darsonvałem mogą poprawić krążenie krwi, co może przynieść lepsze dotlenienie tkanek skóry, poprawić koloryt oraz wspomóc regenerację komórkową.

✔ **Redukcja trądziku:** Dzięki właściwościom antybakteryjnym i Przeciwwzapalnym, Darsonval może pomagać w zwalczaniu trądziku poprzez zmniejszenie stanów zapalnych skóry, ograniczenie bakterii i regulację wydzielania sebum.

✔ **Poprawa elastyczności skóry:** Zabiegi Darsonvałem mogą wspierać produkcję kolagenu i elastyny, co przyczynia się do poprawy elastyczności skóry oraz redukcji widoczności zmarszczek.

Włosy:

✔ **Wzrost włosów:** Stymulacja mieszków włosowych za pomocą Darsonwala może wspomagać wzrost włosów oraz redukcję wypadania.

✔ **Poprawa kondycji skóry głowy:** Działanie antybakteryjne i stymulujące Darsonwala może wspomagać skórę głowy, przeciwdziałając łupieżowi oraz stanom zapalnym.

✔ **Zwiększona przepuszczalność skóry:** Dzięki zwiększonej przepuszczalności skóry, substancje aktywne zawarte w odpowiednich preparatach do pielęgnacji włosów mogą lepiej przenikać i działać na skórę głowy.